



Grupul de utilizatori vizat

Lentilă monofocală cu defocalizare periferică pentru controlul parțial al progresiei miopiei. Pentru copii cu vârste între 4 ani și 18 ani.

Tehnologie

OPTO Plus MyoStop

Comandarea dioptriilor

1/4

Metoda de producție

Generarea suprafeței monofocale pe partea interioară a lentilei. Designul lentilei este descentrat cu 2.5 mm față de centrul geometric al lentilei.

Modalitate de comandă

- Forma ramei
- IPD, OCHT, DBL

Trei modele diferite de lentile Polino Myo

PolinoMyo 25


- câmp vizual central între 9mm și 10 mm, în funcție de dioptriile prescrise
- defocalizare circulară 2.5 D
- vârsta copiilor între 4 și 8 ani

PolinoMyo 16

- câmp vizual central între 10 mm și 12 mm, în funcție de dioptriile prescrise
- defocalizare circulară 1.6 D
- vârsta copiilor între 9 și 13 ani


PolinoMyo 10

- câmp vizual central între 11 mm și 18 mm, în funcție de dioptriile prescrise
- defocalizare circulară 1.0 D
- vârsta copiilor între 14 și 18 ani

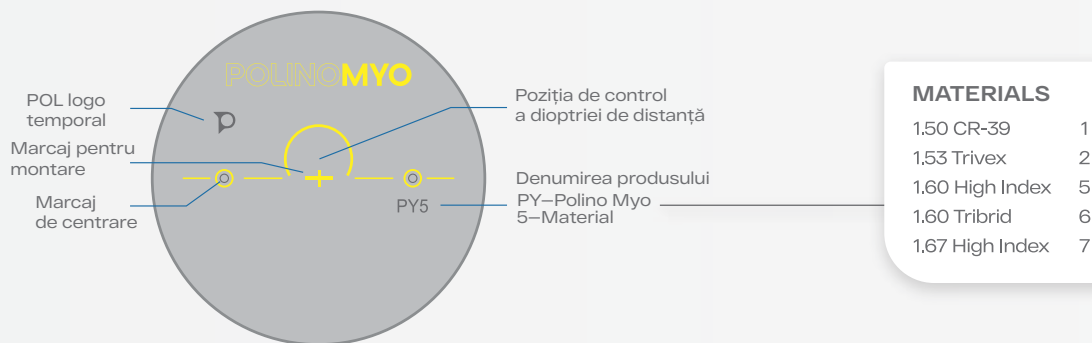

Lentila defocalizată Polino Myo

Defocalizare în funcție de vârsta copilului

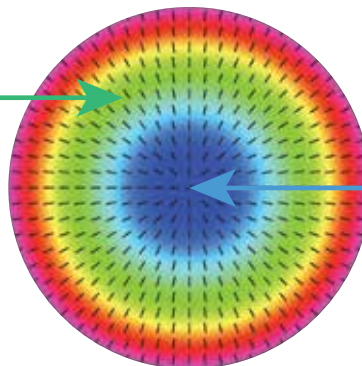

Câmpul vizual cu dioptria prescrisă